

Projektdokumentation

Semesterprojekt 3

Blodtryksmålersystem

ST3PRJ3-03

Gruppe 5

Sundhedsteknologi

Århus Universitet, IHA

Vejleder: Samuel Alberg Thyresøe

Dato: 16/12 2015

Mette Østergård Knudsen, 201404501

Ida Mark Skovbjerg, 201404669

Line Skov Larsen, 201405838

Brian Hansen, 201310502

Mohamed Hussein Mohamed, 201370525

Khaled Edwan, 200800899

Indhold

Indhold	i
1 Kravspecifikation	1
1.1 Godkendelsesformular	1
1.2 Indledning	1
1.3 Systembeskrivelse	1
1.4 Aktør-kontekst diagram	1
1.5 Use cases	1
1.6 Ikke-funktionelle krav	1
2 Accepttest	11
2.1 Indledning	11
2.2 Accepttest for funktionelle krav	11
2.3 Accepttest for ikke-funktionelle krav	12
2.4 Godkendelses formular	13

Kapitel 1

Kravspekifikation

1.1 Godkendelsesformular

Forfattere	Line, Mette, Brian, Mohamed, Khaled og Ida
Godkendes af:	Samuel Alberg Thrysøe
Antal sider:	
Kunde:	IHA

Ved underskrivelse af dette dokument accepteres det af begge parter, som værende kravene til udviklingen af det ønskede system.

Sted og dato:

Kundens underskrift

Leverandørens underskrift



1.2 Indledning

1.3 Systembeskrivelse

1.4 Aktør-kontekst diagram


1.5 Use cases

1.6 Ikke-funktionelle krav

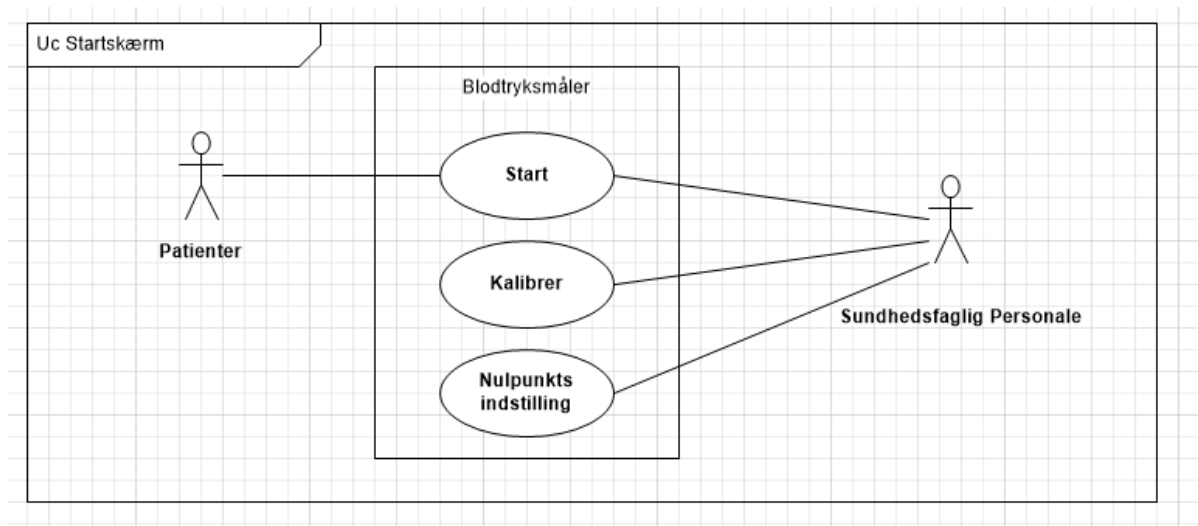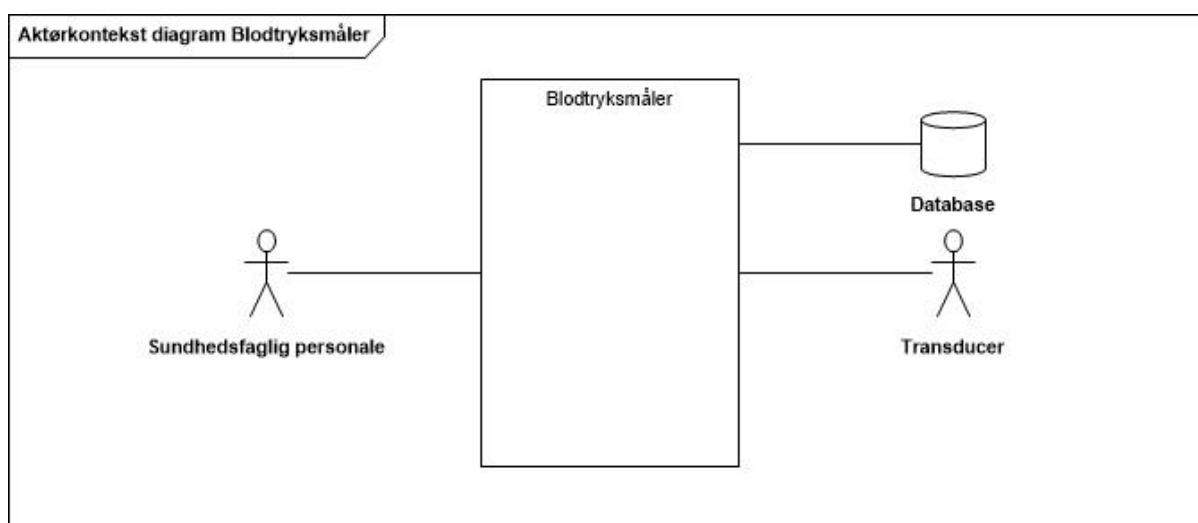

Tabel 1.1: Use case 1

Use case 1	Kalibrer apparat
Mål:	Få kalibreret apparatet
Initiering:	Startes af Servicemedarbejder
Aktører:	Servicemedarbejder (primær)
Referencer:	-
Samtidige forekomster:	én kalibrering pr. apparat
Forudsætninger:	Blodtryksmålersystemet er tændt og tilsluttet kalibreringsudstyret.
Resultat:	Apparatet er kalibreret
Hovedscenarie:	1. Tryk på "Kalibrering" 2. Systemet starter kalibreringen 3. Besked: "Kalibreringen er fuldført" vises på GUI
Udvidelse/undtagelser:	-

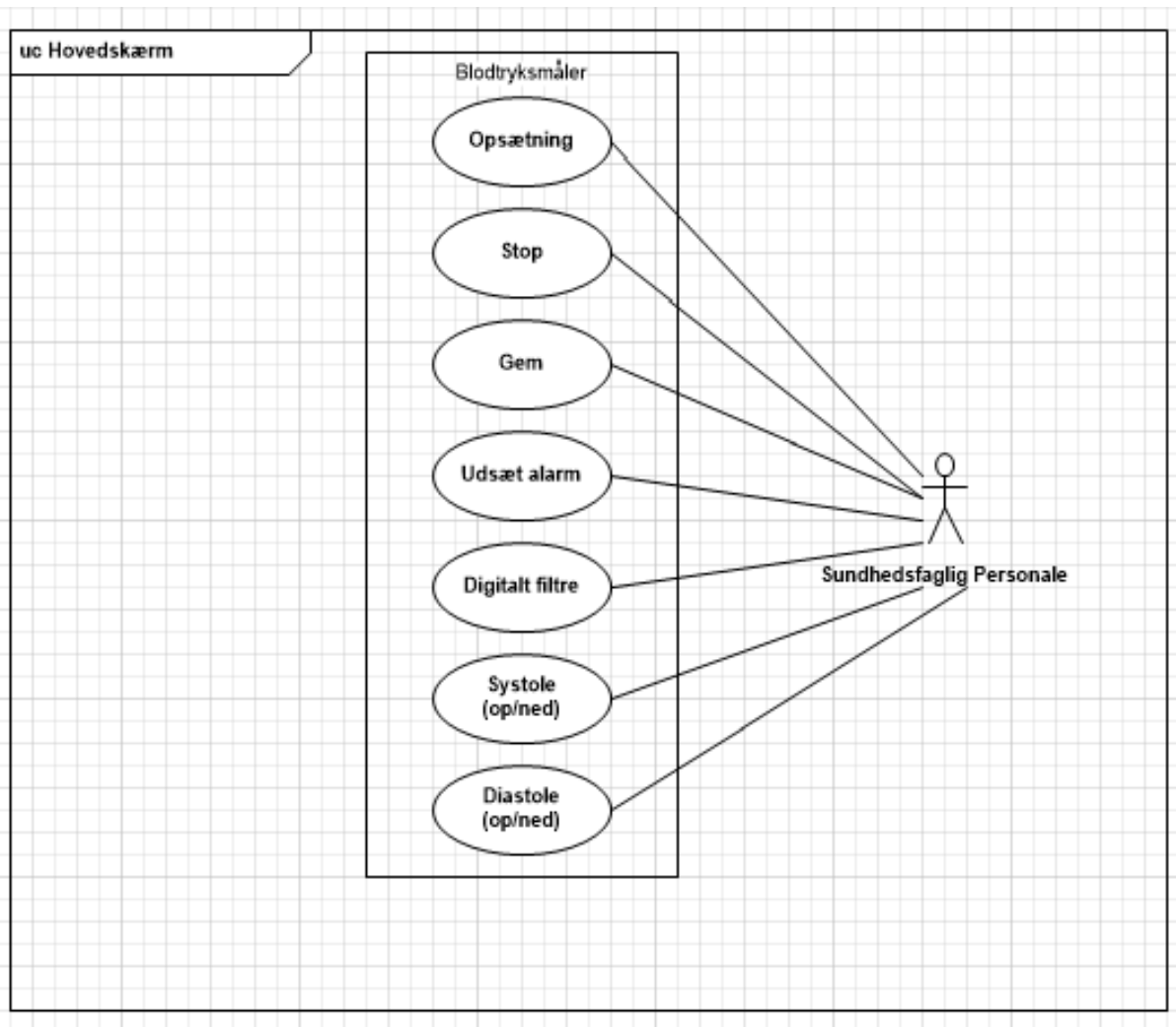

Tabel 1.2: Use case 2

Use case 2	Start måling
Mål:	Få indsendt signalerne fra patienten, startet analysen samt skiftet til hovedskærmen
Initiering:	Startes af Sundhedsfaglig personale
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (primær), Transducer (sekundær)
Referencer:	Use case 1 og Use case 11
Samtidige forekomster:	Én transducer pr. måling
Forudsætninger:	Blodtryksmålersystemet er tændt. Use case 11 er kørt succesfuldt. Sundhedsfaglig personale nr. er indtastet.
Resultat:	Transducerens data vises i GUI
Hovedscenarie:	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på "Start" på startskærm Kommer ind på hovedskærmen [Undtagelse 1: Ingen data indhentet] <ol style="list-style-type: none"> Systemet indhenter data EKG, blodtrykskurve og iltmætningskurve præsenteres kontinuert på en graf. Puls, Systolisk, diastolisk, middeltryk og iltmætning vises som talværdier på GUI.
Udvidelse/undtagelser:	[Undtagelse 1: Ingen data indhentet] 1.1 Intet data er indhentet 1.2 Use case afsluttes

Tabel 1.3: Use case 3

Use case 3	Nulpunkts indstille signal
Mål:	Få nulpunkts indstillet signalerne, sådan at signalerne ligger korrekte på deres akse.
Initiering:	Startes af Sundhedsfaglig personale
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (primær)
Referencer:	Use case 2
Samtidige forekomster:	-
Forudsætninger:	Use case 2 er kørt succesfuldt
Resultat:	Signalet er nulpunkts indstillet
Hovedscenarie:	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på "Nulpunkts indstilling" Systemet starter nulpunkts indstillingen Besked "Nulpunkts indstillingen er fuldent" vises på GUI
Udvidelse/undtagelser:	-

Tabel 1.4: Use case 4

Use case 4	Gem data
Mål:	Få gemt EKG, blodtrykskurve, iltmætningskurve, puls, systole, diastole, middeltryk og iltmætning i databasen
Initiering:	Startes af Sundhedsfaglig personale
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (primær), Database (sekundær)
Referencer:	Use Case 2
Samtidige forekomster:	-
Forudsætninger:	Use case 2 er kørt succesfuldt
Resultat:	Patientens data er gemt i database
Hovedscenarie:	1. Tryk på "Gem" [Undtagelse 1: Intet CPR koblet til data] 2. Systemet gemmer EKG, blodtrykskurve, iltmætningskurve, puls, systole, diastole, middeltryk og iltmætning i database 3. Besked "Data med CPR gemt" vises på GUI
Udvidelse/undtagelser:	[Undtagelse 1: Intet CPR koblet til data] 1.1. Indtast patientens CPR i pop-up vindue 1.2. Tryk på "Næste" 1.3. Systemet gemmer EKG, blodtrykskurve, iltmætningskurve, puls, systole, diastole, middeltryk og iltmætning i database. 1.4. Use case afsluttet

Tabel 1.5: Use case 5

Use case 5	Udsæt alarm
Mål:	Få udsat alarmens lyd i et minut
Initiering:	Startes af Sundhedsfaglig personale
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (primær)
Referencer:	Use case 10
Samtidige forekomster:	
Forudsætninger:	Use case 10: Alarmer, er igangsat
Resultat:	Alarmens lyd er stoppet et minut
Hovedscenarie:	1. Tryk på "Udsæt alarm" 2. Systemet stopper alarmens lyd i et minut
Udvidelse/undtagelser:	-

Tabel 1.6: Use case 6

Use case 6	Digitalt filter
Mål:	Få slået det digitale filter til eller fra
Initiering:	Startes af Sundhedsfaglig personale
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (primær)
Referencer:	Use case 2
Samtidige forekomster:	-
Forudsætninger:	Use case 2 er kørt succesfuldt
Resultat:	Det digitale filter er slået til eller fra
Hovedscenarie:	1. Tryk på "Digitalt filter OFF" 2. Systemet slår det digitale filter fra 3. Tryk på "Digitalt filter ON" 4. Systemet slår det digitale filter til
Udvidelse/undtagelser:	-

Tabel 1.7: Use case 7

Use case 7	Juster systolens grænseværdi
Mål:	Få flyttet grænseværdi intervallet for systolen op eller ned
Initiering:	Startes af Sundhedsfaglig personale
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (primær)
Referencer:	Use case 2
Samtidige forekomster:	
Forudsætninger:	Use case 2 er kørt succesfuldt
Resultat:	Grænseværdi intervallet for systolen er justeret og intervals værdierne vises i GUI.
Hovedscenarie:	1. Tryk på "Systole op" 2. Grænseværdien ændres 2.5mmHg op og intervallet vises i GUI 3. Tryk på "Systole ned" 4. Grænseværdien ændres 2.5mmHg ned og intervallet vises i GUI
Udvidelse/undtagelser:	-

Tabel 1.8: Use case 8

Use case 8	Juster diastolens grænseværdi
Mål:	Få flyttet grænseværdi intervallet for diastolen op eller ned
Initiering:	Startes af Sundhedsfaglig personale
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (primær)
Referencer:	Use case 2
Samtidige forekomster:	-
Forudsætninger:	Use case 2 er kørt succesfuldt
Resultat:	Grænseværdi intervallet for diastolen er justeret og intervals værdierne vises i GUI.
Hovedscenarie:	1. Tryk "Diastole op" 2. Diastolens grænseværdi ændres 2.5mmHg op og intervallet vises i GUI 3. Tryk "Diastole ned" 4. Diastolens grænseværdi ændres 2.5mmHg ned og intervallet vises i GUI
Udvidelse/undtagelser:	-

Tabel 1.9: Use case 9

Use case 9	Afbryd signalet
Mål:	Få afbrudt signalet og vendt tilbage til startskærmen.
Initiering:	Startes af Sundhedsfaglig personale
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (primær)
Referencer:	Use case 2
Samtidige forekomster:	-
Forudsætninger:	Use case 2 er kørt succesfuldt
Resultat:	Afbrudt signalet og vendt tilbage til startskærmen
Hovedscenarie:	1. Tryk på "AFBRYD" 2. Pop-up vindue kommer op: "Er du sikker" 3. Tryk på "Ja" [Udvidelse 1: Tryk på "Nej"] 5. Startskærmen kommer frem og ny måling kan foretages
Udvidelse/undtagelser:	[Udvidelse 1: Tryk på "Nej"] 1.1 Tryk "Nej" 1.2 Kommer tilbage til hovedskærmen 1.3 Use case afsluttet

Tabel 1.10: Use case 10

Use case 10	Alarmer
Mål:	Få startet alarmeringen ved overskridelse af grænseværdi
Initiering:	Systemet starter denne Use case
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (sekundær)
Referencer:	Use case 2
Samtidige forekomster:	-
Forudsætninger:	Målingen i Use case 2 er kørt succesfuldt
Resultat:	Alarmen starter
Hovedscenarie:	1. Grænseværdi overskrides 2. Grænseværdi er overskredet 3. Alarm starter med lyd og tallet som har overskredet grænseværdien blinker. [Udvidelse 1: Anden grænseværdi overskrides]
Udvidelse/undtagelser:	[Udvidelse 1: Anden grænseværdi overskrides] 1.1. Endnu en grænseværdi overskrides 1.2. Lyden fra første alarm fortsætter. Det nye tal som har overskredet grænseværdien blinker ligeledes. 1.3 Use case afsluttet.

Tabel 1.11: Use case 11

Use case 15	Opsætning
Mål:	Få valgt port til NI-DAQ
Initiering:	startes af Sundhedsfaglig personale
Aktører:	Sundhedsfaglig personale (primær)
Referencer:	-
Samtidige forekomster:	Ét blodtryksmålersystem pr. opsætning
Forudsætninger:	Tilsluttet en computer.
Resultat:	Port valgt
Hovedscenarie:	1. Tryk på dropdown på startskærmen 2. Port vælges
Udvidelse/undtagelser:	-

Kapitel 2

Accepttest

2.1 Indledning

2.2 Accepttest for funktionelle krav

Opstilling

Billede indsættes - haves ikke endnu

Tabel 2.1: Accepttest for Use case 1

Use case 1: Kalibrer apparat	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk på "Kalibrering"	Systemet er kalibreret	besked "Kalibreringen er fuldendt"	

Tabel 2.2: Accepttest for Use case 2

Use case 2: Start måling	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk på "Start"	EKG, Blodtryksskurve og iltmætnings- kurver vises kontinuert på en graf. Puls, systolisk, diastolisk, middeltryk og iltmætnings vises som talværdier på GUI	Tal og grafer vises på GUI	

Tabel 2.3: Accepttest for Use case 3

Use case 3: Nulpunkts indstille signal	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk på "Nulpunkts indstilling"	Blodtryksskurven nulpunkts indstilles	Besked "Nulpunkts indstilling er fuldendt"	

Tabel 2.4: Accepttest for Use case 4

Use case 4: Gem data	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk på "Gem"	Data gemmes i database	Besked "Data med CPR gemt"	

Tabel 2.5: Accepttest for Use case 5

Use case 5: Udsæt alarm	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk "Udsæt alarm"	Alarmens lyd stopper	Den overskredede værdi blinker	

Tabel 2.6: Accepttest for Use case 6

Use case 6: Digitalt filter	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk på "Digitalt filter OFF"	Det digitale filter er slået fra	Data er ufiltreret og knappen ændrer navn	
	Tryk på "Digitalt filter ON"	Det digitale filter er slået til	Data er filtreret og knappen ændrer navn.	

2.3 Accepttest for ikke-funktionelle krav

Tabel 2.12: Accepttest for ikke-funktionelle krav

Krav nr.	Krav	Test	Forventet resultat	Resultat	Godkendt/ kommentar

--	--	--	--	--	--

2.4 Godkendelses formular

Ved underskrivelse af dette dokument godkendes den kørte accepttest
Sted og dato:

Tabel 2.7: Accepttest for Use case 7

Use case 7: Juster systolens grænseværdi	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk på "Systole op"	Grænseværdien ændres 2.5mmHg op	Talværdierne ændrer sig på GUI	
	Tryk på "Systole ned"	Grænseværdien ændres 2.5 mmHg ned	Talværdierne ændrer sig på GUI	

Tabel 2.8: Accepttest for Use case 8

Use case 8: Juster diastolens grænseværdi	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk på "Diastole op"	Grænseværdien ændres 2.5mmHg op	Talværdierne ændrer sig på GUI	
	Tryk på "Diastole ned"	Grænseværdien ændres 2.5 mmHg ned	Talværdierne ændrer sig på GUI	

Tabel 2.9: Accepttest for Use case 9

Use case 9: Afbryd signalet	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk "AFBRYD"	Pop-up vindue dukke op	Pop-up skærm: "Er du sikker?"	
	Tryk "Ja"	Tilbage til startskærmen	Startskærmen kommer frem	

Tabel 2.10: Accepttest for Use case 10

Use case 10: Alarmer	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Grænseværdi overskrides	Alarmen starter med lyd og talværdien som har overskredet grænseværdien blinker	Tal blinker	

Tabel 2.11: Accepttest for Use case 11

Use case 11: Opsætning	Test	Forventet resultat	Visuelt resultat	Godkendt/ kommentar
Normalforløb:	Tryk på dropdown og vælg port	Port vælges	Port valgt	

Dato for test	
Godkendes af:	

Kundens underskrift

Leverandørens underskrift